



## HTBasic 8 Windows

# 新しい特長

このマニュアルは HTBasic for Windows リリース 8 の新しい特長をご紹介します。このマニュアルは完全なインストールガイドではなく、HTBasic 製品の最新版でお使いいただける機能についての概説書です。 さまざまなメニューやツールバーが追加されたのに加え、HTBasic 8 には主な特長として次のようなものがあります。

- 1. HTBasic for Windows リリース 8 CDで提供される製品
- 2 . HTBasic 8 のインストール
- 3.ウィンドウズエディタ
- 4.デバッガー
- 5 . DLL ツールキット
- 6 . TRANSFER (トランスファ) GPIB、シリアル、ファイル etc
- 7. ロング整数(Long Integer)とスタティク変数(Static Variable)
- 8. LABEL font (GFONT; 英字ツルータイプフォントでの表現)
- 9. プリンタサポート機能の拡張
- 10. KBD Control Register コードの追加

Appendix 1: New Toolbar(新しいリリースでのツールバー)

Appendix 2: Menu Table(メニューテーブル)





# 1. HTBasic for Windows リリース 8.2 CDで提供される製品

名前 △	サイズ	種類	更新日時
60DOS		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
(a) 61 win		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
in 74win		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
a2win		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
900Util		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
☐ FLOPPY		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
Carrier Leggy Plus		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
SICL		ファイル フォルダ	2000/07/22 2:33
AUTORUN.INF	1 KB	セットアップ情報	2000/07/19 17:20
<b>■</b> CDSETUP.EXE	283 KB	アプリケーション	2000/07/19 17:20
TOOPY.BMP	32 KB	ビットマップ イメージ	2000/07/19 17:20
🗃 Demo.dbd	539 KB	DBD ファイル	2000/07/19 17:20
■ DISK.ID	1 KB	ID ファイル	2000/07/19 17:20
👼 DISKETTE.EXE	504 KB	アプリケーション	2000/07/19 17:20
S DS.DLL	11 KB	アプリケーション拡張	2000/07/19 17:20
htbintro.avi	10,515 KB	Video for Windows	2000/07/19 17:20
INSTALL.DAT	19 KB	DAT ファイル	2000/07/19 17:20
ICENSE.TXT	6 KB	テキスト文書	2000/07/19 17:20
README.TXT	1 KB	テキスト文書	2000/07/19 17:20
SETUP.ICO	3 KB	アイコン	2000/07/19 17:20

(1) 60dos: HTBasic 6.0 for DOS

(2) 61 win: HTBasic 6.1 for Windows(3) 74 win: HTBasic 7.4 for Windows(4) 82 win: HTBasic 8.2 for Windows

(5) 900Uitl: TransEra GPIB ボード HM900 setup for Windows NT

(6) Floppy




(7) Sicl (SICL): HP I/O Library for Instruments (H01.00.03)





### 2.HTBasic 8 のインストール

- (1) HTBasic 8 CD を、CD-ROM ドライブに挿入します。
- (2) 自動スタートで次の画面が現れます。
  - (注)CD の自動スタートをとめてある場合は、Windows エクスプローラ等で導入ください。

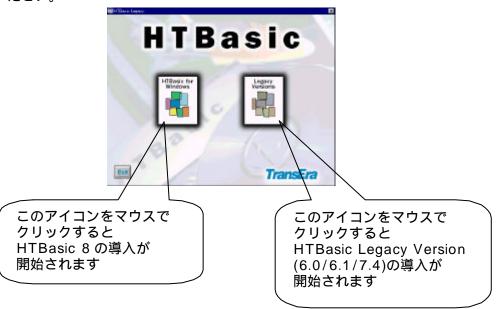

(注) HTBasic Legacy Version 7.4 については、弊社発行の 「日本語版 HTBasic7.0 製品最新情報」をご参照ください

#### (3) 全モジュールの導入





- セットアップの方法 -

導入モジュールの選択

セットアップの方法画面で、カスタム設定を選びます 導入モジュールの頭にある選択用の にチェック(レ)をいれて<次へ(N)>をマウス でクリックし導入を続けて下さい。